




Cervical

Almohadilla Terapéutica

Almofada Terapêutica

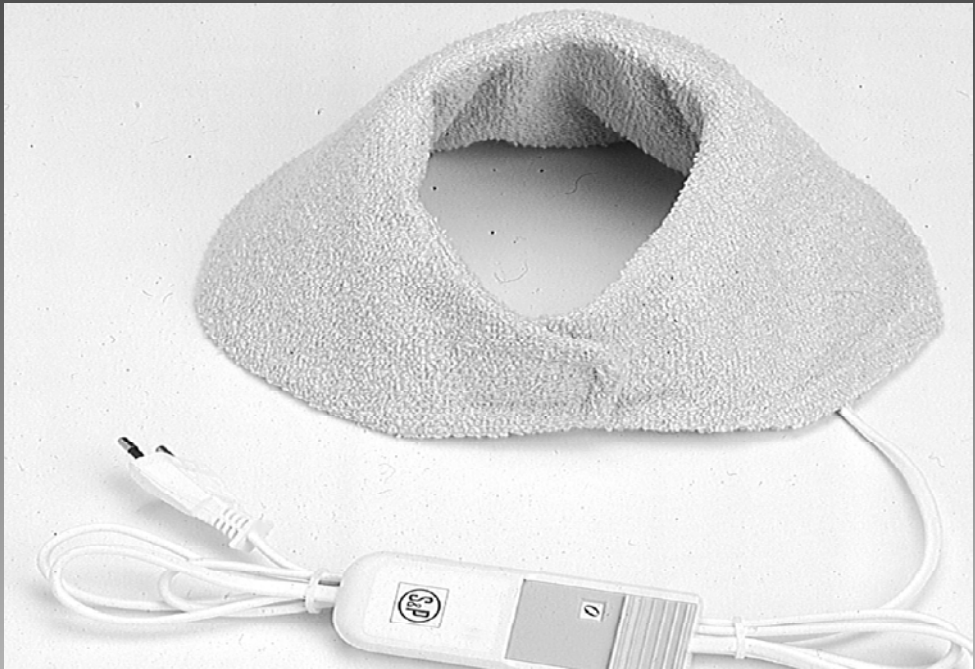

Instrucciones de uso
Instruções de uso

Almohadilla Terapéutica

CERVICAL

El cansancio originado por la actividad diaria se refleja en el organismo.

Los distintos esfuerzos físicos realizados, se acumulan en las zonas más sensibles, especialmente en la nuca y vértebras superiores, originando molestias en general y en los casos más agudos, dolores que pueden llegar a ser persistentes.

El calor es uno de los remedios físicos más antiguos y naturales que se conocen. Su acción calmante y curativa es por todos conocida, se dilatan los vasos sanguíneos, se estimula la circulación de la sangre y se distienden los músculos.

Con la almohadilla S&P Cervical pone en sus manos el sistema eficaz para combatir de forma efectiva el dolor localizado en la nuca y vértebras cervicales, los puntos más sometidos a este tipo de dolores y tensiones.

La correcta aplicación de esta almohadilla permite distender los músculos de la nuca y cuello, evitando la irradiación del dolor en la cabeza, los hombros y la espalda, proporcionando una amplia sensación de bienestar corporal.

Instrucciones importantes

No olvidarlas para consultas posteriores.

Leer las instrucciones

1. El voltaje de su red, debe ser el mismo que indica la etiqueta de su almohadilla. No conectar a una red corriente continua.
2. La posición de máximo calor se empleará exclusivamente para el calentamiento rápido y nunca más de 30 minutos.

Una aplicación prolongada a la máxima potencia puede producir quemaduras en la piel.

Utilizar únicamente el aparato de control suministrado con la almohadilla.

3. No usar la almohadilla doblada, arrugada o formando pliegues. No clavar alfileres, imperdibles y otros objetos metálicos en la almohadilla y no cubrir la misma con chales o envolturas adicionales. No dormirse sin desconectar la almohadilla.
4. Durante su uso, el cable de conexión no debe estar enrollado o cruzado sobre la almohadilla y no tirar del mismo ni utilizarlo como asa para desenchufarla al dejar de usarla.
5. Para su lavado, proceder de acuerdo con el aparato de conservación. No conectar la almohadilla si está húmeda o mojado. No lavar en seco.
6. No utilizar la almohadilla con personas inválidas, disminuidas, insensibles al calor, enfermos o niños, ni tampoco bajo los efectos de somníferos o sedantes.
7. Este aparato no está previsto para su utilización en hospitales.

Examinar la almohadilla con frecuencia para detectar signos de daño o desgaste. En caso de descubrir tales signos o si el aparato ha sido mal utilizado, entregar al proveedor antes de utilizarlo de nuevo.

- El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si está dañado, el aparato debe ser desechado.

E

Funcionamiento

Antes de conectarla, asegúrese que el voltaje de su red sea el mismo de la etiqueta de la almohadilla.

Esta almohadilla está equipada con un dispositivo que permite la obtención de 2 potencias. Las posiciones del conmutador son las siguientes:

0 Paro

1 Potencia mínima

2 Potencia máxima

Para ponerla en funcionamiento, situar el conmutador en la posición de potencia máxima durante 10 minutos aproximadamente, para obtener un rápido calentamiento, pasando seguidamente a la posición mínima para su uso continuado.

Duante su uso es audible un pequeño chasquido del termostato, esto es normal e indica que la almohadilla funciona correctamente.

Conservación

Cuando no se use el aparato

Debe guardarse en lugares secos con el menor número de dobleces y evitar pliegues.

Para lavar la funda textil debe quitarse.

Recomendamos hacerlo a una temperatura no superior a los 40 °C.

La parte interior de plástico, o sea, propiamente la almohadilla, debe limpiarse solamente con un paño humedecido con agua y jabón.

220 - 230 V ~ 50 Hz 16 W



Almofada Terapêutica

CERVICAL

O cansaço iriginado pela actividade diária reflecte-se no organismo.

Os distintos esforços físicos realizados, acumulam-se nas zonas mais sensíveis, especialmente, na nuca e vértebras superiores, originando fadiga em geral e nos casos mais agudos, dores que se podem tornar persistentes.

O calor é um dos remédios físicos mais antigos e naturais que se conhece. A sua acção calmante e curativa é por todos conhecida, dilatando os vasos sanguíneos, estimulando a circulação do sangue e descontrai os músculos.

Com a almofada S&P CERVICAL põe nas suas mãos o sistema eficaz para combater de forma efectiva a dor localizada na nuca e vertebras cervicais, os pontos mais atingidos a este tipo de dores e tensões. A aplicação correcta desta almofada, permite relaxar os músculos da nuca e pescoço, evitando a irradiação da dor à cabeça, ombros e costar, proporcionando uma ampla sensação de bem-estar corporal.

Instruções Importantes

Não esquecer, para consultas posteriores.

1. A voltagem da sua rede, deve ser a mesma que está indicada na etiqueta da sua almofada.
Não ligar a uma rede de corrente contínua.
2. A posição de máximo calor só se emprega, exclusivamente, para aquecimento rápido e nunca mais de 30 minutos.

Uma aplicação prolongada naquela posição pode produzir queimaduras na pele.

Utilizar, unicamente, o aparelho de controlo, fornecido com a almofada.

3. Não usar a almofada dobrada, enrugada ou formando vincos.

Não espetar alfinetes e tão pouco os bebé, assim como outros objectos metálicos, na almofada.

Não cobrir com xales ou coberturas adicionais.

Não adormecer, sem desligar a almofada.

4. Durante o seu uso, o cabo de ligação não deve estar enrolado ou cruzado sobre a almofada, nem tão pouco deve utilizá-lo como puxador para a desligar da tomada.

5. Para a lavar proceder conforme as indicações em separado.

Não ligar a almofada se estiver húmida ou molhada.

Não lavar a seco.

6. Não utilizar, jamais, a almofada sem vigilância directa, especialmente, se é usada por pessoas inválidas, deficientes, insensíveis ao calor, doentes ou crianças nem tão pouco, que estejam sob efeitos de soporíferos ou sedativos.

7. Este aparelho não está previsto para ser utilizado nos hospitais. Dada a natureza têxtil e plástica da almofada, comprovar a estado de velhice e de desgaste, para a sua substituição, para evitar possíveis acidentes.

Funcionamiento

Antes de ligar, assegure-se que a voltagem de sua rede é a mesma, da etiqueta da almofada.

Esta almofada está equipada com um dispositivo que permite a obtenção de duas potências.

As posições do comutador são as seguintes:

- 0 Desligado
- 1 Potência mínima
- 2 Potência máxima

Para a por em funcionamento, situar o comutador na posição de potência máxima durante 10 minutos, aproximadamente, para obter um rápido aquecimento, passando, seguidamente, a posição mínima para seu uso contínuo.

Durante a sua utilização, ouvirá um pequeno estalido do termostato, que é normal e indica que a almofada está a funcionar perfeitamente.

Conservação

Deve ser guardada em lugares secos, com o menor número possível de dobras e vincos muito marcados.

Para lavar a bolsa têxtil, retirá-la da parte plástica.

Recomandamos que a lavagem seja feita a uma temperatura não superior aos +40 °C.

A parte interior de plástico, ou seja, a almofada, deve ser limpa, somente, com um pano humedecido em água e sabão.





Pol. Industrial Llevant
c/ Llevant, 4
08150 Parets del Vallès (BCN)
ESPAÑA
Tel. 93 571 93 00
Fax 93 571 93 01
Tel. int. + 34 93 571 93 00
Fax int. + 34 93 571 93 11
<http://www.soler-palau.com>

Ref. 1431158