




Premium N
Premium Plus N
Almohadilla Eléctrica
Almofada Eléctrica

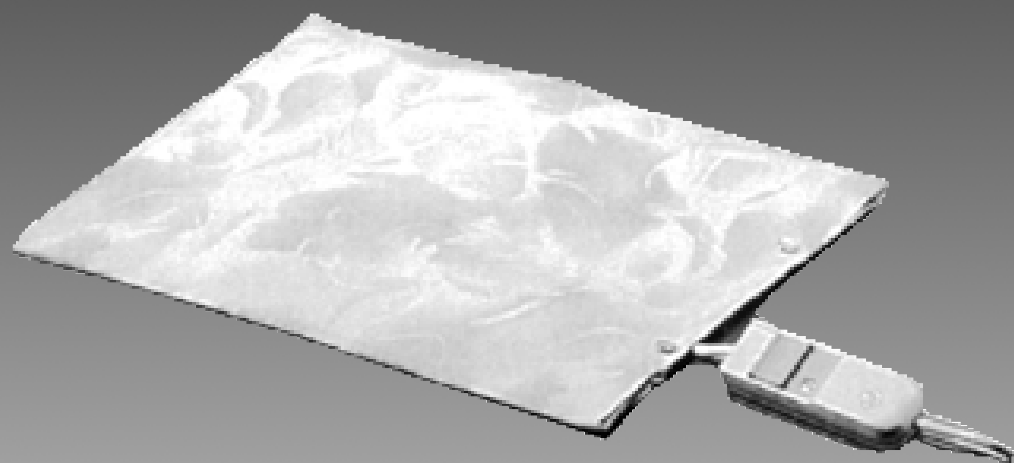

Instrucciones de uso
Instruções de uso

Por sus muy diversos, esta almohadilla permite su aplicación local en distintas partes del cuerpo, aportando el color tradicional que combate el frío, la humedad y alivia los dolores.

Está equipada con un dispositivo que regula la temperatura (4 posiciones) conectando y desconectando la corriente eléctrica a intervalos regulares.

La temperatura de la almohadilla es la máxima que permiten las normas por razones de seguridad personal.

Instrucciones importantes

No olvidarlas para consultas posteriores.

Leer las instrucciones

1. El voltaje de su red, debe ser el mismo que indica la etiqueta de su almohadilla. No conectar a una red corriente continua.
2. La posición de máximo color se empleará exclusivamente para el calentamiento rápido y nunca más de 30 minutos.
Una aplicación prolongada a la máxima potencia puede producir quemaduras en la piel.
Utilizar únicamente el aparato de control suministrado con la almohadilla.
3. No usar la almohadilla doblada, arrugada o formando pliegues. No clavar alfileres, imperdibles y otros objetos metálicos en la almohadilla y no cubrir la misma con chales o envolturas adicionales. No dormirse sin desconectar la almohadilla.

4. Durante su uso, el cable de conexión no deber estar enrollado o cruzado sobre la almohadilla y no tirar del mismo ni utilizarlo como asa para desenchufarla al dejar usarla.

5. Para su lavado, proceder de acuerdo con el apartado de conservación. No conectar la almohadilla si está húmeda o mojada. No lavar en seco.
6. No utilizar jamás la almohadilla sin vigilancia directa y especialmente si la usan personas inválidas, disminuidas, insensibles al calor, enfermos o niños, ni tampoco bajo los efectos de somníferos o sedantes.
7. Este aparato no está previsto para su utilización en hospitales.

Examinar la almohadilla con frecuencia para detectar signos de daño o desgaste. En caso de descubrir tales signos o si el aparato ha sido mal utilizado, entregar al proveedor antes de utilizarlo de nuevo.

- El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si está dañado, el aparato debe ser desechado.

Funcionamiento

Antes de conectarla, asegúrese que el voltaje de su red sea el mismo de la etiqueta de la almohadilla.

Las posiciones del conmutador son las siguientes:

- 0 Paro
- 1 (-) Potencia
- 2 Potencia
- 3 Potencia
- 4 (+) Potencia

Para ponerla en funcionamiento, situar el conmutador en la posición de potencia máxima durante 10 minutos aproximadamente, para obtener un rápido calentamiento, pasando seguidamente a la posición mínima para su uso continuado.

Duante su uso es audible un pequeño chasquido del termostato, esto es normal e indica que la almohadilla funciona correctamente.

Conservación

Cuando no se use el aparato

Debe guardarse en lugares secos con el menor número de dobleces y evitar pliegues.

Para lavar la funda textil debe quitarse.

Recomendamos hacerlo a una temperatura no superior a los 40 °C.

La parte interior de plástico, o sea, propiamente la almohadilla, debe limpiarse solamente con un paño humedecido con agua y jabón.

Premium N 220-230 V 50 Hz 45 W

Premium Plus N 220-230 V 50 Hz 60 W



Pelos seus usos diversos, esta almofada permite a sua aplicação local, em distintas partes do corpo, ocasionando o calor tradicional que combate o frio, a humidade, aliviando, assim, as dores.

Está equipada com um dispositivo que regula a temperatura (4 posições) ligando e desligando a corrente eléctrica com intervalos regulares.

A temperatura de almofada é a máxima que permitem as normas, por razões de segurança pessoal.

Instruções Importantes

Não esquecer, para consultas posteriores.

1. A voltagem da sua rede, deve ser a mesma que indica a etiqueta da sua almofada.

Não ligar a uma rede de corrente contínua.

2. A posição de máximo calor só se emprega, exclusivamente, para aquecimento rápido e nunca mais de 30 minutos.

Uma aplicação prolongada na máxima potência pode provocar queimaduras na pele.

Utilizar, unicamente, o aparelho de controlo, que é fornecido com a almofada.

3. Não usar a almofada dobrada, enrugada ou formando vincos.

Não espantar alfinetes e tão pouco os de bebé, assim como outros objectos metálicos, na almofada.

Não a deve cobrir com xales ou coberturas adicionais.

Não dormir, sem que desligue primeiro, a almofada.

4. Durante o seu uso, o cabo de ligação deve estar enrolado ou cruzado sobre a almofada e não deve utilizá-lo como puxador para a desligar.

5. Para a lavar proceder conforme as indicações em separado.

Não ligar a almofada se estiver húmida ou molhada.

Não lavar a seco.

6. Não utilizar, jamais, a almofada sem vigilância directa, especialmente, se vai ser usada por pessoas inválidas, deficientes, insensíveis ao calor, doentes ou crinaças, nem tão pouco, que estejam sob efeitos de soporíferos ou sedativos.

7. Este aparelho não está previsto para ser utilizado nos hospitais. Dada a natureza têxtil e plástica da almofada, comprovar o estado de velheice e de desgaste e se tal se verificar, devem proceder à sua substituição, para evitar possíveis acidentes.

Funcionamento

Antes de ligação, assegure-se que a voltagem de sua rede é a mesma da etiqueta da almofada.

As posições do comutador são as seguintes:

0 Desligado

1 (-) Potência

2 Potência

3 Potência

4 (+) Potência

Para a por em funcionamento, situar o comutador na posição de potência máxima durante 10 minutos, aproximadamente, para obter um rápido aquecimento, passando, seguidamente, à posição mínima para seu uso contínuo.

Durante a sua utilização, ouvir um pequeno estalido do termostato, isto é normal e indica que a almofada está a funcionar correctamente.

Conservação

Deve ser guardada em lugares secos, com o mínimo possível de dobras e vincos muito marcados.

Para lavar a bolsa têxtil, deve ser retirada a parte plástica.

Recomendamos que seja feito a uma temperatura, não superior aos +40 °C.

A parte interior de plástico, ou seja, propriamente a almofada, deve ser limpa, somente, com um pano humedecido em água e sabão.

Premium N 220-230 V 50 Hz 45 W

Premium Plus N 220-230 V 50 Hz 60 W





Pol. Industrial Llevant
c/ Llevant, 4
08150 Parets del Vallès (BCN)
ESPAÑA
Tel. 93 571 93 00
Fax 93 571 93 01
Tel. int. + 34 93 571 93 00
Fax int. + 34 93 571 93 11
<http://www.soler-palau.com>

Ref. 1431157